



MARSDEN

Katalóg lekárskeých váh 2021



Inovácia

Nová vec alebo nové spôsoby robenia niečo.

Inovácia nie je len prepracovaním nového dizajnu. Skutočná inovácia, ktorá je skutočne jedinečná; v našom priemysle mení životy, zachraňuje životy a hlboké spôsoby ako to, čo je com

Rovnaké produkty s lesklým n je umenie vytvoriť niečo vyskúšať, to znamená niečo, čo to urobí rýchlejšie, jednoduchšie alebo viac e predtým.

V Marsdene inovujeme: našu prvú stupnicu prenosu pacientov, ale potom by sme to urobili. Stolička M-200 bola extra široká sedačka na váženie laru a M-545 boli prvé váhy (výpočet BSA).

Skutočná inovácia bola začatá s inováciou skôr, ako bola prvá svojho druhu s nemeckými pacientmi. M-125, M-225 má mať plochu povrchu tela

M-100 prestal používať stĺpcový priestor, alebo jeho nedostatok, k stupnicu: štandard, bola prvá, ktorá sa dala umiestniť do rohu, rohový dizajn, takže poskytuje o menej miesta, než by inak bolo.

svojej základni, aj keď je väčšia ako priestor a efektívne zaberá uld.

Unit 7,
Canton Business Park
Crippin Hill Way
Rotherham
S60 1FD
Tel: 01709 264296
n-weighing.co.uk

Zmluvy o servise a údržbe

Marsden je schopný poskytnúť servisné kontakty kdekoľvek vo Veľkej Británii: Náš tím technikov môže opraviť, udržiavať a kalibrovať vaše váhy.

Namiesto outsourcingu dodávateľom sú všetci servisní technici Marsden najatí a vyškolení spoločnosťou Marsden. Sme hrdí na našu schopnosť poskytovať vysokokvalitné a spoľahlivé riešenie na jednom mieste pre vás a vaše zariadenie.

Obsah


Stupnica prenosu pacienta
Strana 6



Detské váhy
Strana 8



Podlahové váhy
Strana 10

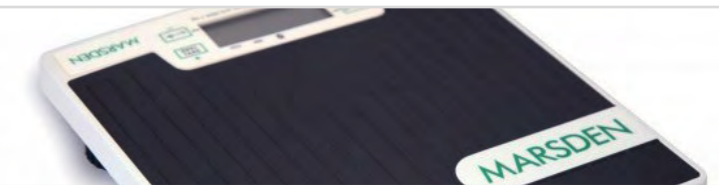

Stípkové váhy
Strana 14



Stolička Váhy
Strana 16



Váhy na invalidnom vozíku
Strana 20



Posteľové a vysokokapacitné váhy
Strana 24



Váhy zloženia tela
Strana 30



Výter, Divadlo a Zádušné váhy
Strana 32



Monitorovanie zdravotnej starostlivosti
Strana 34



Výškové miery a Príslušenstvo
Strana 36



Pacient

Prenosová mierka



Zvážte imobilných pacientov za pár sekúnd!

Získanie presnej hmotnosti pre imobilného pacienta je každodennou výzvou, ktorej čelia nemocnice na celom svete. Kým neprišla škála na prenos pacienta, neexistovalo rýchle, jednoduché a presné riešenie.

PTS je prenosová doska so vstavanou váhou. To znamená, že je možné okamžite získať presnú hmotnosť pacienta, keď je preložený z vozíka do postele.

Pretože PTS nahrádza prenosovú dosku, znamená to, že získanie hmotnosti pacienta je súčasťou existujúceho procesu a na váženie nie je potrebný žiadny čas navyše. Výsledok? Zdravotnícki pracovníci môžu podávať dávky liekov alebo liečbu rýchlo a presne.



- Okamžité a presné váženie imobilných pacientov Rýchle a jednoduché – už žiadne hádanie hmotnosti
- Použitie počas presunu pacienta z vozíka na lôžko
- Dôstojnejšie a menej stresujúce pre pacientov
- 50 hodín výdrže batérie
- Dodávané s háčikmi na pripevnenie na stenu
- Utrite povrch
- Veľký, prehľadný digitálny displej hmotnosti

Kapacita:	250 kg	Zdroj:	Interná nabíjateľná batéria
Promócie:	500 g	Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Funkcie:	Hold, prenosný	Záručná doba:	1 rok
Rozmery:	1800 mm x 700 mm x 30 mm	Príslušenstvo:	CC-999
Váha váhy:	11 kg		



Marsden M-300

Naša najpredávanejšia detská váha sa používa v pôrodniciach po celom svete. Je ideálny na sledovanie najmenších zmien hmotnosti bábätka – vrátane príjmu mlieka.

Táto váha sa môže pochváliť výnimočnou výdržou batérie, vďaka čomu je ideálna na použitie v komunite.

Kapacita:	15 kg
Promócie:	2g<6kg>5g
Funkcie:	Hold, Tare, Portable
Rozmery:	370 mm x 585 mm x 120 mm
Váha váhy:	3 kg
Zdroj:	Sietové alebo 2 x 1,5V AA batérie
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	CC-400, RK-400, Vozík

Detské váhy

Hmotnosť dieťaťa je jedným z mála skorých ukazovateľov zdravia dieťaťa. V skutočnosti môžu byť najmenšie zmeny hmotnosti dieťaťa prvým znakom toho, že niečo nie je v poriadku, takže mať presnú váhu, na ktorú sa môžete spoliehať, je životne dôležité.

Rad detských váh Marsden má stupnicu s presnosťou od 2 g do 20 g a všetky naše profesionálne váhy sú schválené pre triedu III, aby ste mali pri vážení úplný pokoj.

Navyše, s funkciami tarovania a podržania, ktoré sú dostupné na všetkých našich detských váhach, nebolo váženie nikdy jednoduchšie. Ergonomický dizajn a hladký povrch našich detských váh ďalej zaisťuje, že proces váženia je pre bábätká pohodlný a bezpečný.

Naše detské váhy sú tiež navrhnuté tak, aby boli ľahké a prenosné, pričom pre každý model sú k dispozícii voliteľné kufríky.



Marsden M-400/M-410

Prenosná a odolná váha na váženie dojčiat, batoliat a detí vďaka odnímateľnému podnosu.

Kapacita:	M-400: 20 kg M-410: 50 kg
Promócie:	M-400: 5 g < 10 kg > 10 g M-410: 10 g < 20 kg > 20 g
Funkcie:	Hold, Tare, Portable
Rozmery:	370 mm x 585 mm x 120 mm
Váha váhy:	3 kg
Zdroj:	Sietové alebo 6 x AA batérie
Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	CC-400, RK-400, Vozík

Marsden M-310

Ultraľahká a prenosná závesná váha, ideálna pre cestujúce pôrodné asistentky a zdravotné návštevy.

Kapacita:	10 kg
Promócie:	10 g
Funkcie:	Hold, Tare, Portable
Rozmery:	79 mm x 150 mm x 193 mm
Váha váhy:	0,45 kg
Zdroj:	6 x AAA batérie
Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	CC-310

Marsden M-700

Kompletné riešenie váženia 3 v 1 pre bábätká, deti a dospelých. Obsahuje detskú vaničku a sedadlo.

Kapacita:	150 kg (dospelý) / 60 kg (dieťa / batola)
Promócie:	50 g (dospelý) / 20 g (dieťa / batola)
Funkcie:	Hold, Tare, BMI
Rozmery:	700 mm x 600 mm x 45 mm
Hmotnosť:	37 kg
Zdroj:	Sietové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záruka:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň, Wifi, Bluetooth



Podlahové váhy

S podlahovými váhami Marsden sa môžu pacienti počas procesu váženia cítiť bezpečne a pohodlne. Náš stojan na váhu má protišmykový povrch, takže pacienti môžu bezpečne bez problémov nastúpiť. Dokonca ponúkame biele verzie našich obľúbených podlahových váh, ktoré pomáhajú pacientom trpiacim demenciou.

Všetky tieto váhy sú navrhnuté tak, aby boli malé a ľahké, aby sa dali ľahko skladovať a prenášať, čo znamená, že ich možno ľahko prenášať po nemocnici alebo v ambulancii praktického lekára.

Je dôležité, aby lekárske váhy boli presné, aby sa zaručilo správne podávanie dávok a liečby. To je dôvod, prečo sú všetky profesionálne lekárske váhy Marsden schválené pre triedu III, so stupnicou od 50 g.

Mnohé z našich podlahových váh sú vybavené funkciami podržania a tarovania na zjednodušenie váženia, ako aj funkciou BMI pre jednoduchosť.

Marsden M-420

M-420 je vľajkovou loďou podlahových váh spoločnosti Marsden. Je najpredávanejším na celom svete vďaka svojej spoľahlivosti a odolnému dizajnu s dlhou životnosťou.

Táto robustná prenosná váha je schválená ako trieda III, tak aj schválená MDD. S presnosťou 50 g je M-420 ideálny na získanie presných údajov o hmotnosti v lekárskom prostredí.

Váženie sme ešte zjednodušili pridaním funkcií tarovania a podržania k tejto váhe, ako aj funkcie BMI. Jednoducho zadajte výšku pacienta a váha automaticky vypočíta BMI.

K dispozícii je aj biela verzia tejto váhy, aby bolo váženie pohodlnejšie pre pacientov s demenciou.



Kapacita:	220 kg	Zdroj:	Sieťové alebo 6x AA batérie
Promócie:	50g<150kg>100g	Schwálenia:	Trieda III a MDD Schwálené
Funkcie:	Hold, Tare, Portable	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	320 mm x 310 mm x 60 mm	Príslušenstvo:	CC-420, Bluetooth, Wifi
Váha váhy:	3 kg		



Marsden M-430

Marsden M-430 má rovnaký dizajn ako náš obľúbený M-420 a má 200 g, čo z neho robí ideálne riešenie pre ordinácie a zdravotné strediská všeobecných lekárov. Zosilnená hliníková konštrukcia znamená, že táto váha je ľahká, no zároveň je skonštruovaná tak, aby poskytovala roky presného váženia.

Kapacita:	220 kg	Zdroj:	Sietové alebo 6x AA batérie
Promócie:	200 g	Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Funkcie:	Hold, Tare, Portable, BMI	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	Rozmer 320 mm x 310 mm	Príslušenstvo:	CC-420, Bluetooth
Hmotnosť:	3,4 kg		



Marsden M-425

Pre prostredia citlivé na hmotnosť použite M-425. Na základe našich odolných, prenosných podlahových váh M-420 a M-430 je skonštruovaná tak, aby vydržala. S jasným ručným displejom hmotnosti je ideálny pre zdravotné návštevy, školské sestry a rodinných lekárov.

Kapacita:	220 kg	Zdroj:	Sietové alebo 6x AA batérie
Promócie:	50g<150kg>100g	Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Funkcie:	Hold, Tare, Portable, BMI	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	Rozmer 320 mm x 310 mm	Príslušenstvo:	CC-420, Bluetooth
Hmotnosť:	3,4 kg		



Marsden M-530

Robustná, extra široká základňa robí M-530 ideálnym na váženie väčších pacientov. Indikátor je samostatný, ideálny pre oblasti citlivé na hmotnosť a tri displeje zobrazujú hmotnosť, výšku a BMI.

Kapacita:	300 kg alebo 500 kg
Promócie:	50 g<150kg>100g (300kg) / 100g<300kg>200g (500g)
Funkcie:	Hold, Tare, BMI
Rozmery:	600 mm x 390 mm x 50 mm
Váha váhy:	8 kg
Zdroj:	Sietové/nabijateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	CC-530, Wifi, Bluetooth

Marsden M-510

Stojan na váhu prémiovej kvality s dialkovým indikátorom, ideálny pre prostredia citlivé na hmotnosť

Kapacita:	250 kg
Promócie:	100 g
Funkcie:	Hold, Tare, Portable, BMI
Rozmery:	310 mm x 310 mm x 90 mm
Váha váhy:	6 kg
Zdroj:	Sietové/nabijateľné
Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	CC-420, Wifi, Bluetooth



Marsden M-545

S nosnosťou 250 kg, presnosťou 100 g a robustnou kvalitou konštrukcie je M-545 spoľahlivá základná podlahová váha. Funkcia Body Surface Area (BSA) sa ukázala ako veľmi populárna pri výpočte dávok liekov. Indikátor je ručný pre prostredia citlivé na hmotnosť.

Kapacita:	250 kg	Zdroj:	Sietové alebo 6x AA batérie
Promócie:	100 g	Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Funkcie:	Hold, Tare, BSA, BMI	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	310 mm x 310 mm	Príslušenstvo:	CC-420
Hmotnosť:	6 kg		



Stípcové váhy

Stípcové váhy môžu používateľom ušetriť čas a námahu. Teraz už nie je potrebné zohýbať sa, aby ste čítali alebo zapínali váhy; indikátor je na úrovni pásu pre jednoduchšie použitie.

Všetky profesionálne stípcové váhy Marsden sú schválené pre triedu III, aby sa zabezpečilo, že všetky zobrazené hmotnosti sú presné a spoľahlivé.

K dispozícii je celý rad kapacít a stupňov a mnohé z našich stípcových váh sú dodávané aj s integrovaným meraním výšky pre jednoduchšiu analýzu pacienta.

Rovnako ako väčšina lekárskech váh Marsden, naše stípcové váhy sa dodávajú s funkciami tarovania a držania, ako aj BMI.



Marsden M-100

Rohová dizajnová stípcová váha s integrovaným meraním výšky a výpočtom BMI. Ideálne pre praktických lekárov a nemocnice.

Kapacita:	300 kg
Promócie:	50g<150kg>100g
Funkcie:	Hold, Tare, BMI, Height Measure
Rozmery:	1240 mm x 440 mm x 440 mm
Váha váhy:	15 kg
Zdroj:	Sietové/nabijateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň, Wifi, Bluetooth



Marsden M-110

Prémiová stípcová váha ideálna na použitie na klinikách a na nemocničných oddeleniach. Je ľahko ovládateľný, s voliteľnými mierami výšky.

Kapacita:	250 kg
Promócie:	100 g
Funkcie:	Hold, Tare, BMI
Rozmery:	935 mm x 310 mm x 310 mm
Váha váhy:	9 kg
Zdroj:	Sietové/nabijateľné
Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi, meranie výšky



Marsden M-125

Vstupná úroveň, ľahko použiteľná stípcová stupnica. Ideálne pre použitie v ambulanciách všeobecných lekárov, ambulanciách a kluboch zdravia.

Kapacita:	250 kg
Promócie:	100 g
Funkcie:	Hold, Tare, BMI, BSA
Rozmery:	960 mm x 310 mm x 310 mm
Hmotnosť:	9 kg
Zdroj:	Sietové/nabijateľné
Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Záruka:	4 roky
Príslušenstvo:	Meranie výšky



Stolička Váhy

Stoličkové váhy Marsden sú vďaka svojej spoľahlivosti a odolnosti súčasťou lekárskej ordinácie, opatrovateľských domovov a nemocníc po celom svete.

Pre pacientov s problémami s pohyblivosťou alebo pre tých, ktorí nemôžu stáť, môže byť váženie problémom. Stoličková váha Marsden poskytuje jednoduché a dostupné riešenie s maximálnym komfortom pre pacienta.

Všetky naše stoličkové váhy sú ľahké stoličky so zabudovanou váhou, vďaka čomu sa ľahko prepravujú a používajú.

Ukazovatele na našej stoličkovej váhe sú otočené dozadu, takže zdravotná sestra alebo opatrovatelia môžu ľahko vidieť hodnotu hmotnosti, vypočítať BMI a dokonca bezdrôtovo prenášať údaje z váhy.

Marsden M-250

Ďalší prvý z Marsden. M-250 nie je len presné vážiace zariadenie; v skutočnosti podporuje a zlepšuje osvedčené postupy ručnej manipulácie.

Jednou z najväčších výziev váženia jedinca s obmedzenou pohyblivosťou pomocou stoličkovej váhy je skutočný proces nastupovania a vystupovania zo sedadla váhy. S M-250 to nie je problém. Jemné zdvíhacie sedadlo víta pacienta alebo rezidenta a potom ho vedie dolu do sedu.

Po dokončení váženia sa po stlačení tlačidla sedadlo jemne zdvihne, pričom jedinec potrebuje len vedenie a minimálnu námahu, aby mu pomohol zo sedadla.

Okrem toho, že proces váženia je pre pacienta menej stresujúci, M-250 znižuje námahu, ktorú vyžaduje personál, a tým znižuje riziko poranenia chrbta. V konečnom dôsledku by to mohlo znamenať menej času stráveného vážením a zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť.



Kapacita:	250 kg	Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Promócie:	100 g	Schválenia:	Trieda III Schválené
Funkcie:	Počkať, Tare	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	1085 mm x 670 mm x 1015 mm	Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi
Váha váhy:	38 kg		

Marsden M-200



Pojme viac pacientov ako štandardná stoličková váha.

Extra široké, jednodielne sedadlo označuje Marsden M-200 za jedinečný medzi váhami stoličiek. Táto vysokokapacitná váha je vhodná pre širší rozsah veľkostí pacientov ako váha so štandardnou šírkou stoličky; stupnice po 50 g znamenajú pre vašich pacientov presné údaje o hmotnosti.

Sklopné opierky rúk a nôh znamenajú ľahký prístup a väčší komfort a bezpečnosť pacienta,

Vyberte voliteľnú tlačiareň na vytvorenie záznamu hmotnosti pacienta. Bluetooth a Wifi umožňujú prenášať údaje o hmotnosti z váhy do vopred nakonfigurovaných databáz.

Kapacita:	250 kg alebo 300 kg	Zdroj:	Sietové/nabíjateľné
Promócie:	50g<150kg>100g	Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Funkcie:	Hold, Tare, BMI	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	Rozmer 530 mm x 460 mm	Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi
Váha váhy:	27 kg		



Marsden M-210

Marsden M-210 je stoličková váha s vysokou presnosťou, schválená triedou III, navrhnutá na ľahké váženie pacientov, ktorí nemôžu stáť. S kapacitou 250 kg a presnosťou 50 g je ideálny na váženie v nemocniciach a opatrovateľských zariadeniach. Na tlač a zaznamenávanie údajov o hmotnosti je k dispozícii celý rad príslušenstva. M-210 je najobľúbenejšia váha na stoličky Marsden.

Váha obsahuje funkciu BMI, ktorá sa vypočíta po zadaní výšky pacienta pomocou plnohodnotnej numerickej klávesnice. Podržať znamená, že údaj o hmotnosti sa stabilizuje a zobrazí hmotnosť pacienta, aj keď už nie je na váhe. Tare umožňuje odstrániť nechcenú váhu z displeja.

Sklopné opierky rúk a nôh pre bezpečnosť pacienta.

Kapacita:	250 kg
Promócie:	50g<150kg>100g
Funkcie:	Hold, Tare, BMI
Rozmery:	400 mm x 380 mm
Váha váhy:	21 kg
Zdroj:	Sietové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň, Wifi, Bluetooth



Marsden M-225

Marsden M-225 je základná váha na stoličky schválená pre triedu III. S kapacitou 250 kg a presnosťou na 100 g je ideálny pre nemocnice a opatrovateľské domy a má všetky základné základné funkcie potrebné na presné váženie pacientov. Táto stoličková váha obsahuje výpočet BSA (Body Surface Area).

Vyberte si M-225, ak potrebujete základnú, vysoko presnú váhu na váženie pacientov, ktorí nie sú schopní stáť – alebo by ste mohli využiť stoličkovú váhu, ktorá používa BSA na výpočet dávky liekov. Váha má nosnosť 250 kg a stupnicu po 100 g.

Nasúvanie pacientov do sedadla je jednoduché, vďaka sklopným opierkam rúk a opierok nôh. Brzdy sú osadené na dvoch zo štyroch koliesok a vďaka robustnej konštrukcii vydrží táto váha roky pravidelného používania.

Kapacita:	250 kg
Promócie:	100 g
Funkcie:	Hold, Tare, BMI, BSA
Rozmery:	400 mm x 380 mm
Váha váhy:	20 kg
Zdroj:	Sietové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky



Váhy na invalidnom vozíku

Pre pacientov, ktorí sú pripútaní na invalidný vozík, môže byť presun z invalidného vozíka na váhu stoličky nepríjemný, komplikovaný proces, ale stále je vhodnejší ako nepohodlie zdvíhacích váh.

Riešením sú váhy na invalidný vozík Marsden. Pacienti môžu byť rýchlo a jednoducho vážení na invalidnom vozíku alebo postavením pomocou zábradlia na M-620, M-640 a M-652.

Rovnako ako mnohé z našich lekárskech váh, aj invalidné váhy Marsden sa dodávajú so zabudovaným tarovaním, podržaním a BMI, ktoré uľahčujú váženie pacientov. Všetky sú tiež schválené pre triedu III. Pre pripojenie k telehealth systémom je možné pridať aj Bluetooth.

Ak je prenosnosť dôležitá, ponúkame aj dve ľahké váhy pre invalidné vozíky, ktoré sú ideálne pre zdravotné sestry a návštevníkov zdravotnej starostlivosti.

Marsden M-615

Navrhnuté komunitnými sestrami pre komunitné sestry. S hmotnosťou približne 9 kg je nová váha M-615 našou vôbec najľahšou váhou na invalidné vozíky – takmer polovičnou hmotnosťou oproti najbližšiemu ekvivalentu.

Vďaka jednoduchému skladaciu dizajnu sa M-615 tiež veľmi ľahko nastavuje - s káblami umiestnenými v konštrukcii, čo znamená žiadny neporiadok. Jednoducho rozložte, zapojte indikátor a zapnite: teraz ste pripravení vážiť.

Dva nosníky sú tiež pevné - a spolu s integrovanou rukoväťou na prenášanie to znamená, že sa ľahšie prenáša.

Nosníky sú tiež širšie ako štandardné - čo znamená, že M-615 je vhodný pre takmer každý invalidný vozík.

M-615, navrhnutý v úzkej spolupráci s dietológmi z Birmingham Community Healthcare NHS Foundation Trust, má komplexné informácie od samotných ľudí, ktorí ho budú používať deň, čo deň – takže si môžete byť istí, že vám umožní vážiť pacientov na invalidných vozíkoch rýchlejšie, jednoduchšie a s menšou námahou.

Rovnako ako u iných prémiových lekárskech váh Marsden sú všetky funkcie váženia prístupné prostredníctvom indikátora s dvoma obrazovkami, ktorý obsahuje plnohodnotnú numerickú klávesnicu na výpočet BMI.



Kapacita:	300 kg	Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Promócie:	100 g	Schválenia:	Trieda III Schválené
Funkcie:	Hold, Tare, BMI, Portable	Záručná doba:	4 roky
Oblasť váženia lúča:	Rozmer 740 mm x 112 mm	Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi
Váha váhy:	10,2 kg		

Vyššie použité obrázky sú digitálne rendery. Pre presnejšiu reprezentáciu toho, ako bude váha vyzerat', navštívte www.marsden-weighing.co.uk

Marsden M-650

Marsden M-610



M-610 uľahčuje váženie jednotlivcov na invalidných vozíkoch – či už v domovoch opatrovateľskej služby alebo v ich vlastnom dome. Robustne skonštruované a s integrovanými rukovätami na prenášanie sú nosníky navrhnuté tak, aby vydržali roky. Intuitívny indikátor s plnohodnotnou numerickou klávesnicou a duálnym displejom uľahčuje výpočet BMI a prednastavená tara znamená, že je možné odstrániť hmotnosť invalidného vozíka.

Kapacita:	300 kg
Promócie:	100 g
Funkcie:	Hold, Tare, BMI, Portable
Rozmery:	1200 mm x 150 mm x 95 mm
Váha váhy:	8,5 kg na nosník
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň, CC-610, Bluetooth, Wifi



M-650 má veľkú platformu s nízkym profilom, ktorá pojme takmer každý invalidný vozík. Túto váhu sme spárovali s našim intuitívnym indikátorom, ktorý má plnú numerickú klávesnicu pre jednoduchý výpočet BMI.

Pre pacientov, ktorí môžu stáť, dve madlá (M-652) umožňujú bezproblémový proces váženia, pričom displej hmotnosti je namontovaný na jednom madle.

Pre jednoduchšie použitie je platforma k dispozícii so stĺpcom indikátora (M-651), takže zobrazenie hmotnosti je ľahko čitateľné vo výške pásu, čo uľahčuje lekárovi a pacientovi vidieť údaje o hmotnosti.

Alternatívne má M-653 jedno sklopné madlo. Váha poskytuje presné údaje o hmotnosti do 100 g a má nosnosť 300 kg. BMI je možné vypočítať zadaním výšky pacienta. Indikátor je napájaný internou nabíjateľnou batériou pre lepšiu prenosnosť.

Marsden M-620



S priestrannou, skladacou váhou, rukovätami a kolieskami na prepravu a štandardným indikátorom Marsden, nie je divu, že M-620 je váha pre invalidné vozíky, ktorú si zvolilo toľko nemocníc. Táto pevná, vysoko robustná váha vydrží mnoho rokov používania – a s voľiteľným Bluetooth alebo Wifi je tiež odolná voči budúcnosti.

Kapacita:	300 kg
Promócie:	100 g
Funkcie:	Hold, Tare, BMI
Rozmery:	700 mm x 800 mm x 80 mm
Váha váhy:	50 kg
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi



Marsden M-651

Štandardná vážiaca plošina s indikátorom namontovaným na stĺpci.



Marsden M-652

Vážiaca plošina pre invalidné vozíky s dvoma madlami pre stabilitu.



Marsden M-653

Invalidná váha s jedným sklopným madlom na uľahčenie manévrovania s váhou.

Kapacita:	300 kg	Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Promócie:	100 g	Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Funkcie:	Hold, Tare, BMI	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	1150 mm x 800 mm x 66 mm	Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi
Váha váhy:	28,6 kg		



Posteľová a veľkokapacitná váha

Kľúčovou výhodou lôžkových váh je možnosť váženia imobilných pacientov, ktorí nie sú schopní postaviť sa na podlahovú váhu alebo presadnúť na stoličkovú váhu.

V Marsden ponúkame rad posteľných váh, vrátane podložiek, ktoré sa zasúvajú pod každé z koliesok postele, alebo dvoch nosníkov, na ktoré sa dá posteľ prisunúť. Oba tieto typy váh sú schválené pre triedu III a dodávajú sa s tarou, držaním a BMI.

Všetky posteľné váhy dostupné od Marsden sa ľahko používajú a sú vysoko presné. Pre vysoko presné váženie naše lôžkové váhy s nosnosťou 600 kg ponúkajú dieliky už od 200 g, zatiaľ čo naše váhy s nosnosťou 3 000 kg a viac majú presnosť 1 kg.

Posteľné váhy Marsden sa dodávajú v rôznych tvaroch a veľkostiach, aby vyhovovali vašim potrebám.



Marsden M-900

Posteľová váha Marsden M-900 je prémiová posteľná váha vhodná pre nemocnice a opatrovateľské domy. Ideálne pre použitie s bariatrickými lôžkami.

Táto posteľná váha má nosnosť 600 kg a stupnicu po 200 g. Je vybavený výklopnými rampami, kolieskami pre prenosnosť a plnohodnotnou numerickou klávesnicou. Úplná numerická klávesnica znamená, že je možné zadať výšku pacienta a vypočítať BMI. Tri obrazovky prémiového ukazovateľa jasne zobrazujú hmotnosť, výšku a BMI.

Kapacita:	600 kg
Promócie:	100g<300kg>200g
Funkcie:	Hold, Tare, Prednastavená Tara, BMI
Rozmery:	1256 mm x 366 mm x 61 mm
Váha váhy:	11 kg na nosník
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi


Marsden M-950

Marsden M-950 je ľahko použiteľná, prenosná posteľná váha. Vďaka tomu je váženie pacientov pripútaných na lôžko jednoduché a bezproblémové bez nepohodlia pre pacienta. Skladá sa zo štyroch podložiek, ktoré možno jednoducho umiestniť pod kolieska postele, čo znamená, že nie je potrebné presúvať posteľ na váženie do inej miestnosti.

Na prepravu vložiek medzi miestnosťami a oddeleniami je k dispozícii vozík. M-950 má schválenie triedy III.



Kapacita:	600 kg alebo 1000 kg
Promócie:	200 g alebo 500 g
Funkcie:	Hold, Tare, Prednastavená Tara, BMI
Rozmery podložky:	390 mm x 260 mm x 45 mm
Váha váhy:	5 kg na podložku
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi

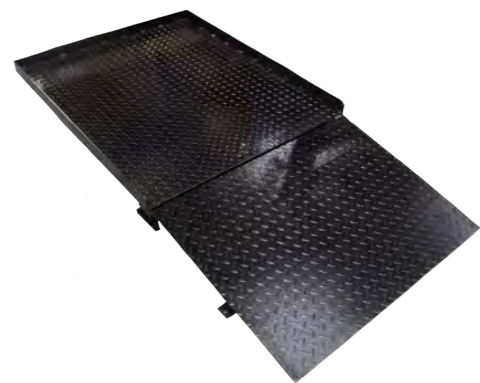

Marsden M-910

Plošina na váženie postele vyrobená na mieru s prispôsobiteľnými rozmermi a kapacitami.

Kapacita:	600 kg alebo 1500 kg
Promócie:	Od 200 g
Funkcie:	Hold, Tare, Prednastavená Tara, BMI
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky

Marsden M-920

Na mieru vyrobená vážiaca plošina z nehrdzavejúcej ocele s prispôsobiteľnými rozmermi a kapacitami.

Kapacita:	600 kg alebo 1500 kg
Promócie:	200 g alebo 500 g
Funkcie:	Hold, Tare, Prednastavená Tara, BMI
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky



Marsden M-925

Stolová váha z mäkkej ocele so sklopnými rampami, s plytkým sklonom, s rôznymi kapacitami a stupnicami.


Kapacita:	600 kg alebo 1500 kg
Promócie:	200 g alebo 500 g
Funkcie:	Hold, Tare, Prednastavená Tara, BMI
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky



Marsden M-930

Plošinová váha namontovaná v šachte (v rovine s podlahou), čo znamená, že nie sú potrebné žiadne rampy.

Kapacita:	600 kg alebo 1500 kg
Promócie:	Od 200 g
Funkcie:	Hold, Tare, Prednastavená Tara, BMI
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záručná doba:	4 roky

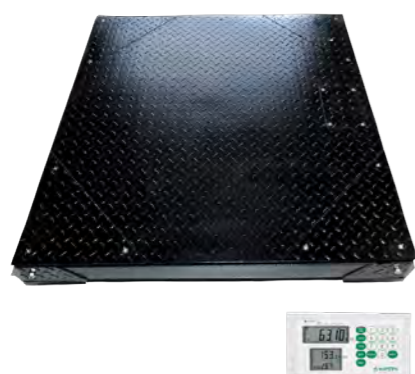

Marsden M-600/M-605

Jediné schválené príslušenstvo na váženie kladkostroja v Spojenom kráľovstve.

Ako zdravotnícka pomôcka musia byť nadstavce na váženie kladkostroja schválené spoločnosťou MDD. Vďaka tomu sú Marsden M-600, M-605 a MHS-2500 jediným zariadením na váženie kladkostroja, ktoré je dovolené používať.

Oba modely M-600 a M-605 sú ľahké a prenosné, určené na priporenie k rozperným tyčiam kladkostrojov. Pre rozperné tyče štandardnej šírky zvolte M-600; prípadne si vyberte M-605 so šírkou 10 cm navyše pre väčšie kladkostroje.

M-600 je ideálny na váženie zdvíhakov v nemocniciach a opatrovateľských domoch s veľkým indikátorom pre ľahké odčítanie hmotnosti zdravotníckym personálom. Zdravotníci považujú funkcie M-600 za ľahko použiteľné a znamená to, že meranie hmotnosti je rýchle a jednoduché.

Na prenášanie váhy v komunite je k dispozícii prenosné puzdro, aby sa zabezpečilo, že každý pacient, ktorý nemôže stáť, môže mať presné údaje o hmotnosti.



Kapacita:	200 kg	Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Promócie:	100 g	Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Funkcie:	Hold, Tare, BMI, Portable	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	M-600: 630 mm x 275 mm x 160 mm M-605: 730 mm x 275 mm x 160 mm	Príslušenstvo:	Tlačiareň, CC-600, Bluetooth, Wifi
Váha váhy:	M-600: 6 kg M-605: 6,7 kg		

Marsden M-800

Bariatrická váha Marsden M-800 je vysokokapacitná lekárska váha schválená triedou III s pevnými madlami a veľkou plochou základňou.

Táto váha je navrhnutá pre bariatrických a geriatrických pacientov, vďaka čomu je čítanie hmotnosti jednoduché a bez námahy.

Pacientom, ktorí môžu potrebovať podporu počas váženia, ponúkajú dve pevné madlá stabilitu a podporu bez ohľadu na tlak, ktorý na ne pôsobí. Samotná plošina je extrémne nízka, takže pacienti môžu pohodlne nastupovať a vystupovať z váhy bez zbytočného stresu.

Indikátor obsahuje dva displeje, jeden pre hmotnosť a druhý pre výšku a BMI. Plnohodnotná numerická klávesnica umožňuje zamestnancovi bez námahy zadávať údaje o výške, aby bolo možné rýchlo a jednoducho vypočítať BMI.

Medzi ďalšie funkcie patrí Hold, Tare a Preset Tare – čo znamená, že máte presné odčítanie hmotnosti pri každom použití váhy. Bluetooth je ďalším voliteľným doplnkom pre túto váhu.



Kapacita:	300 kg	Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Promócie:	50g<150kg>300g	Schválenia:	Trieda III Schválené
Funkcie:	Hold, Tare, BMI, Portable	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	700 mm x 600 mm x 50 mm	Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi, HM-201M
Váha váhy:	33 kg		

Marsden M-640

Marsden M-640 je veľkokapacitná lekárska váha určená na pohodlné váženie bariatrických pacientov, najmä tých, ktorí nemôžu stáť alebo potrebujú oporu pri stáť. Ukázalo sa však, že táto škála je veľmi populárna na celom rade rôznych oddelení a pre široké spektrum pacientov.

Má extra veľkú základňu, ktorá pojme väčšinu invalidných vozíkov vďaka nízko profilovým rampám, sklápateľnému sedadlu a robustným zábradiam. S plnou numerickou klávesnicou a dvoma displejmi, ktoré uľahčia výpočet BMI pacienta.

Váha má funkcie Tare/Preset Tare, aby bolo možné pred vážением pacienta odpočítať hmotnosť invalidného vozíka. Funkcia Hold stabilizuje údaj o hmotnosti na displeji a zostane na displeji po tom, čo pacient zostúpi z váhy.

Pre vytlačený záznam údajov o hmotnosti pacienta je možné pridať voliteľnú tlačiareň na vygenerovanie tlačenej kópie hmotnosti pacienta, BMI a výšky (ak boli zadané).



Kapacita:	300 kg alebo 500 kg	Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Promócie:	50 g<150kg>100g (300kg); 100 g<300kg>200g (500kg)	Schválenia:	Trieda III Schválené
Funkcie:	Hold, Tare, BMI	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	800 mm x 800 mm	Príslušenstvo:	Tlačiareň, Bluetooth, Wifi
Váha váhy:	48 kg		



Váhy na zloženie tela

Stupnica zloženia tela je váha, ktorá poskytuje výpočet zdravia tela na základe množstva metrik. Zvyčajne poskytujú údaje o hmotnosti, ako aj BMI, hmotnosť tuku, celkovú vodu v tele a ďalšie.

Váhy zloženia tela Marsden sú bližšie k štandardu DEXA ako ktorákoľvek iná testovaná váha zloženia tela, takže sa s nimi môžete spoľahnúť na presné výsledky.

Je to preto, že na výpočet hodnôt používajú biometrickú impedanciu. Zo základne váhy preteká telom bezpečný a veľmi malý elektrický prúd. Elektrický prúd prúdi cez vodu, tuk a svalovú hmotu rôznymi rýchlosťami a váha meria túto rýchlosť, aby vypočítala, ako tvoria telo.

Všetky váhy Marsden na zloženie tela majú 4-ročnú záruku.



MBF-6000

Marsden MBF-6000 je stupnica zloženia tela schválená triedou III, ktorá je široko používaná v nemocniciach. Vďaka svojej prenosnosti je vhodný aj pre mobilných lekárov, fyzioterapeutov a dietológov.

Táto váha má tlačiareň na trvalý záznam všetkých nameraných hodnôt; vďaka tomu je tiež ideálny na monitorovanie kľúčových lekárskech údajov. Tieto výtlačky môžu byť uložené vo vašich záznamoch alebo udelených patentoch pre ich vlastné.

Funkcie Hold a Tare sú tiež súčasťou tejto váhy, aby sa proces zjednodušil.

Kapacita:	300 kg
Promócie:	100 g
Funkcie:	Hold, Tare, BMI
Rozmery:	340 mm x 450 mm x 80 mm
Váha váhy:	9,5 kg
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň (ako štandard), CC-530



MBF-6010

Marsden MBF-6010 je ľahko použiteľná váha zloženia tela, ktorá poskytuje úplný obraz o zdraví tela.

Táto váha poskytuje ešte viac meraní ako MBF-6000, vrátane bazálnej metabolickej rýchlosti (BMR), celkovej telesnej vody (TBW), beztukovej hmoty (FFM), tukovej hmoty (FM), percenta telesného tuku, svalovej hmoty (MM), Proteínová hmotnosť (PM), extracelulárna voda (ECW), intracelulárna voda (ICW), kostrový sval (SM), hladina viscerálneho tuku (VFA), metabolický vek (AGEM), hmotnosť a BMI, ako aj celkové zdravotné skóre.

Rovnako ako MBF-6000, aj MBF-6010 sa dodáva s tlačiarňou, ktorá poskytuje tlačенú kópiu výsledkov.

Kapacita:	300 kg
Promócie:	100 g
Funkcie:	Hold, Tare, bMI
Rozmery:	340 mm x 450 mm x 80 mm
Váha váhy:	12,5 kg
Zdroj:	Sieťové/nabíjateľné
Schválenia:	Trieda III a MDD Schválené
Záručná doba:	4 roky
Príslušenstvo:	Tlačiareň (ako štandard), HM-201M, HM-201D



Marsden B-400

Táto váha na tampóny so schválením triedy III a krytím IP67 je ideálna na použitie v divadle, laboratóriu alebo márnici. Má plášť z nehrdzavejúcej ocele pre skutočnú ochranu pred vlhkosťou, takže ho možno pravidelne umývať a udržiavať hygienicky bez obáv z poškodenia vodného kameňa.

Kapacita:	6 kg	Zdroj:	Sieť/batérie
Promócie:	1 g	Schválenia:	Trieda III Schválené
Funkcie:	Počkať, Tare	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	285 mm x 255 mm x 90 mm		



Marsden DS-502

Toto je najobľúbenejšia váha NHS na váženie tekutín. prečo? Pretože má certifikáciu IP65, schválenie triedy III a má výdrž batérie 1000 hodín pri plnom nabití. Rovnako ako všetky naše váhy na tampóny má misku z nehrdzavejúcej ocele a je vysoko presná. Rýchla a ľahko použiteľná váha.

Kapacita:	6 kg	Zdroj:	4x batérie veľkosti C
Promócie:	1 g	Schválenia:	Trieda III Schválené
Funkcie:	Počkať, Tare	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	250 mm x 230 mm x 120 mm		



Marsden DS-673SS

Toto je naša jediná úplne vodotesná váha na tampóny s krytím IP68, ktorá je navrhnutá tak, aby vám poskytla pokoj pri čistení. S plne nabitou batériou môže táto váha poskytnúť 40 hodín nepretržitého používania a má veľký LED displej pre ľahké čítanie aj za zhoršených svetelných podmienok.

Kapacita:	6 kg	Zdroj:	Sietové/nabijateľné
Promócie:	1 g	Schválenia:	Trieda III Schválené
Funkcie:	Počkať, Tare	Záručná doba:	4 roky
Rozmery:	290 mm x 250 mm x 135 mm		



Výter, divadlo a márnica

Tieto váhy majú široké využitie, ale zvyčajne sa používajú v laboratóriu, márnici alebo patologickom prostredí na váženie orgánov alebo výterov.

Pretože tieto váhy pracujú s organickou hmotou, je nevyhnutné, aby sa dali ľahko čistiť, aby sa zabránilo kontaminácii a zabránilo sa šíreniu chorôb. Preto sú všetky tampónové, divadelné a márnicevé váhy Marsden navrhnuté s vrchnou doskou z nehrdzavejúcej ocele.

Lekári zvyčajne vážia orgány pred operáciou, zatiaľ čo v márniach sa vážia na analytické účely.

Váhy na výtery sa na druhej strane používajú na váženie výterov od pacientov, čo lekárom umožňuje analyzovať a porovnávať vzorky, ktoré dostanú. To môže pomôcť identifikovať biologické charakteristiky alebo varovať pred potenciálnymi chorobami.



Monitorovanie zdravotnej starostlivosti

Počas vrcholiacej pandémie nás oslovilo mnoho našich verných zákazníkov pracujúcich v rámci NHS s otázkou, či by sme mohli dodať predmety, ako sú teplomery a oxymetre, aby sme pomohli monitorovať pacientov s COVID-19 v nemocnici.

Marsden sa prispôbil súčasnej situácii a rýchlo sa snažil vyhovieť rastúcej potrebe zdravotnej starostlivosti

Produkty. S dôkladným zvážením a radami odborníkov v lekárskej profesii sme do nášho sortimentu pridali nasledujúce produkty.

Všetky uvedené produkty na monitorovanie zdravotnej starostlivosti sú vysoko presné a schválené MDD, vďaka čomu sú obľúbené v nemocniciach, ambulanciách všeobecných lekárov a na použitie v rámci komunity.



Marsden T-100

Náš bezkontaktný teplomer schválený MDD uľahčuje meranie teploty. Presnosť s presnosťou na 0,2°C.

Presné na:	±0,2 °C
Rozmery:	152 mm x 103 mm x 39 mm
Meracia vzdialenosť:	1-3 cm
Zdroj:	Vymeniteľné batérie
Batérie:	2 x AAA batérie
Schválenia:	Schválenie triedy III
Záručná doba:	1 rok



Marsden T-210

Tento automatický nástenný teplomer má schválenie MDD a je presný s presnosťou na 0,2°C.

Presné na:	±0,2 °C
Rozmery:	140 mm x 93 mm x 93 mm
Meracia vzdialenosť:	1-10 cm
Zdroj:	Kábel USB typu C alebo lítiová nabíjateľná batéria 18650
Schválenia:	Schválenie triedy III
Záručná doba:	1 rok



Marsden O-100

O-100 je oxymeter, ktorý je odolný voči striekajúcej vode a pádom a dokáže uložiť až 12 sád meraní.

Rozmery:	56 mm x 34 mm x 30 mm
Režimy merania:	Náhodná kontrola a priebežné meranie
Pamät:	12 meraní
Čas:	5 sekúnd
Zdroj:	2x 1,5V AAA batérie
Schválenia:	Trieda III Schválené
Záruka:	1 rok



Výškové miery a príslušenstvo

Marsden ponúka širokú škálu príslušenstva, ktoré možno použiť v spojení s vašimi zariadeniami, aby vám proces váženia uľahčil a zjednodušil.

Po vypočítaní spätnej väzby od našej zákazníckej základne sme tvrdo pracovali, aby sme zabezpečili, že máme k dispozícii výškové opatrenia, ktoré vyhovujú všetkým potrebám. Možno ich spárovať s našimi stĺpovými váhami alebo voľne stojacimi

jednotky, ktoré je možné prepravovať a presúvať vo vašej prevádzke.

Máme tiež na sklade širokú škálu prenosných kufríkov, ktoré možno použiť v kombinácii s niektorými z našich najpredávanejších váh, ako sú M-300, M-400 a M-545. Tie nielen chránia váhy Marsden, ale tiež ich robia neuveriteľne prenosnými a ľahko sa prepravujú.



Marsden HM-80P

Plastová mechanická meracia tyč, perfektne dimenzovaná pre bábätká a batoliatá.

Promócie	1 mm
Rozsah merania:	10-80 cm
Rozmery:	880 mm x 350 mm x 100 mm
Hmotnosť:	0,7 kg



Marsden HM-80D

Digitálna výšková tyč na meranie bábätiok a batoliat. Pasuje na M-400/M-410.

Promócie	1 mm
Rozsah merania:	35-80 cm
Rozmery:	625 mm x 355 mm x 105 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Zdroj:	1 x AAA batéria



Marsden HM-250P

Prenosné, ľahké a ľahko prenosné meranie výšky. Jednoduchá montáž.

Promócie	1 mm
Rozsah merania:	0 - 2 m / 6,6"
Rozmery:	2130 mm x 350 mm x 415 mm



Marsden HM-201M

Teleskopické výškové meradlo, ktoré je možné upevniť na naše stĺpové váhy.

Promócie	1 mm
Rozsah merania:	60 cm - 2 m / 24" - 6,6"
Rozmery:	936 mm x 35 mm x 26 mm



Marsden HM-201D

Automatické meranie výšky, ktoré možno pripojiť k M-100, M-110 a MBF-6010.

Promócie	1 mm
Rozsah merania:	1,2 m - 2 m
Rozmery:	1780 mm x 40 mm x 30 mm
Hmotnosť:	0,85 kg
Zdroj:	1 x AAA batéria



Marsden HM-200D

Digitálny teleskopický výškový meter na priporenie na stĺpové váhy Marsden.

Promócie	1 mm
Meranie	Rozsah: 1,2 m - 2 m
Rozmery:	1780 mm x 40 mm x 30 mm
Hmotnosť:	0,85 kg
Zdroj:	1 x AAA batéria



Marsden HM-210D

Digitálny nástenný výškový meter vyrobený z eloxovaného hliníka. Vhodné pre montáž na stenu s digitálnym displejom.

Promócie	1 mm
Rozsah merania:	1 m - 2,1 m
Rozmery:	2100 mm x 80 mm x 70 mm
Hmotnosť	1,25 kg
Zdroj:	1 x AAA batéria



Marsden H-628

Voľne stojace výškové meradlo so štvorcovou tyčou z eloxovaného hliníka a veľkou základňou, na ktorej môžu pacienti stáť.

Promócie	1 mm alebo 1/8"
Rozsah merania:	75 cm až 2,15 m
Rozmery:	2150 mm x 380 mm x 350 mm



Marsden H-629-1/H-629-2

Výškové meranie, vyrobené z eloxovaného hliníka. Namontovaný plastový posuvník a oporná tyč na nohy.

Promócie	1 mm
H-629-1 Dĺžka	1 m
H-629-2 Dĺžka	2 m



Marsden H-630

Hliníková výšková tyč, ktorá sa dá pripevniť na stenu pomocou dvoch pántov, ktoré sú súčasťou dodávky. Plastový posúvač sa pri nepoužívaní zloží naplocho k stene.

Promócie	1 mm alebo 1/8"
Rozsah merania:	75 cm - 2,15 m
Rozmery:	2,15 m



Tlačiarne Marsden

Marsden TP-2100 je tlačiareň s vysokým rozlíšením, ktorá je kompatibilná s mnohými lekáckymi váhami Marsden a tlačí dátum, čas, hmotnosť, výšku a BMI.

Je vhodný pre všetky váhy s indikátorom DP-3810, ako je stĺpik M-100, stolička M-200, posteľ M-950 a plošinová váha M-925.

Rozhodnutie:	8 bodov/mm
Maximálna šírka tlače:	48 mm
Rýchlosť tlače:	75 mm/s



Diaľkový displej Marsden

Tento diaľkový displej je vhodný pre stojan na váhu M-425, ako aj pre podlahové váhy M-420 a M-430.

Okrem toho, že je váha pre používateľa prístupnejšia, je tento vzdialený displej vhodný aj na použitie v oblastiach citlivých na hmotnosť.

Rozmery:	70 mm x 120 mm x 55 mm
----------	------------------------



DP-3810

DP-2400

Marsden adaptéry

Adaptér DP-3810 funguje s indikátorom DP-3810.

Tento adaptér DP-2400 je vhodný pre váhy Marsden, ktoré majú indikátor DP-2400 alebo DP-3600.

adaptér:	3pinový hrot + 12V 1A 2,5mm adaptér na hrot pre DP-3800/DP-3810/M-4xx
adaptér:	3pinový hrot + 12V 300mA pre DP-2400/MS-41xx



Marsden CC-400

Prenosné puzdro Marsden CC-400 pre detské váhy Marsden M-400, M-410 a M-300.

Má dobre polstrovaný dizajn, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné presúvanie váh.



Marsden CC-530

Prepravné puzdro vhodné pre väčšie barietrické váhy, ako sú M-530 a MBF-6000.

Obsahuje užitočné vrecká na uloženie adaptérov a rukoväte pre jednoduché prenášanie.



Marsden RK-400

Batoch Marsden RK-400 je vhodný pre detské váhy Marsden M-300, M-400 a M-410.

Jeho inteligentný dizajn pohodlne rozloží váhu na chrbát užívateľa.



Marsden CC-600 a CC-605

Prepravné kufre na váženie kladkostrojov M-600 a M-605.

Tieto puzdrá sú takmer identické, ale jedno je o niečo širšie, aby sa zmestilo na extra dĺžku M-605.



Marsden CC-310

Prenosné puzdro Marsden CC-310 je určené na uloženie ručnej detskej váhy Marsden M-310.

Vďaka veľkorysému polstrovaniu dokáže udržať detskú váhu v bezpečí.



Marsden CC-610

Kufrík na prenosné váženie invalidného vozíka M-610.

Ľahké prenášanie váh kamkoľvek je potrebné. Obsahuje 2 polstrované puzdrá pre každý lúč a puzdro indikátora



Marsden CC-420

Toto puzdro je vhodné pre podlahové váhy Marsden M-420, M-425, M-430, M-510 a M-545.

Má pohodlný priestor pre tieto podlahové váhy a dobre ich chráni vďaka polstrovanému dizajnu.



Marsden CC-999

Puzdro na prenášanie na zips pre váhu na prenos pacienta M-999.

Uľahčuje prepravu váhy na prenos pacienta na dlhšie vzdialenosti a poskytuje ochranu pri skladovaní. Obsahuje ramenné popruhy a rúčky na oboch koncoch.



SPRÁVA

Máme veľmi pracovitý administratívny tím, ktorý bude spravovať vašu zmluvu od prvej realizácie zmluvy až po dokončenie servisnej návštevy.



PORTÁL

Na základe spätnej väzby od našich existujúcich zákazníkov sme výrazne investovali do najmodernejšieho klientskeho portálu na mieru.

Tento portál možno použiť na rezervovanie návštev technikov, digitálne sledovanie majetku a sťahovanie všetkého certifikácia.



PODPORA

Naša interná technická podpora oddelenia sú vždy po ruke a vedia vám pomôcť

akékoľvek problémy, ktoré môžete mať so svojim vážením zariadení.



PLÁNOVANIE

V Marsdene chápeme, že na to, aby sme mohli zrealizovať úspešnú zmluvu o poskytovaní služieb, musíme zabezpečiť, aby naše plánovanie prebiehalo odborne von.



Náš servisný program

Počiatkové požiadavky:

Krok 1:	Potrebovali by sme zoznam miest, ktoré by sme mali navštíviť
Krok 2:	V ideálnom prípade by sme potrebovali zoznam zariadení
Krok 3:	Špecifikácia zariadení, napr. kapacita
Krok 4:	Kontaktné údaje, s kým sa spojiť


Nasledujúca počiatková implementácia:

Po podpísaní zmlúv a ich vrátení nám tu do Marsdenu by sme vás potrebovali nastaviť na náš systém. Aby sme to mohli urobiť, potrebovali by sme informácie uvedené v krokoch vyššie. To zaisťuje, že dokážeme efektívne realizovať servisné zmluvy.

Náš tím správy služieb s vami bude neuveriteľne úzko spolupracovať, aby sme zaistili, že budeme schopní splniť všetky vaše požiadavky a že zmluva bude prebiehať čo najhladšie.

Pre viac informácií kontaktujte: service@marsdengroup.co.uk

Užitočná informácia

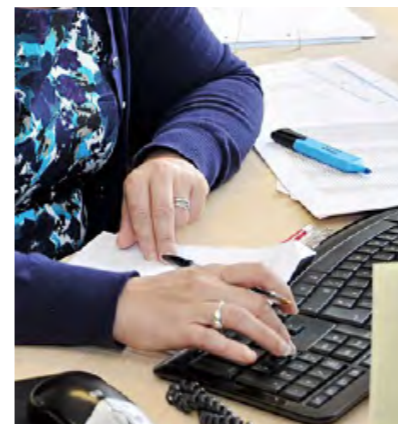

Klientsky portál

Klientsky portál Marsden ponúka svojim zmluvným zákazníkom rýchly, jasný a efektívny prehľad o súčasnej situácii služieb.

Klientsky portál Marsden umožňuje našim zákazníkom prístup k nasledujúcim údajom o majetku, kalibračným certifikátom, faktúram, rezervácii hovoru a histórii váh.



akreditácie

Marsden bol posúdený a zaregistrovaný spoločnosťou SGS Limited (akreditovaný notifikovaný orgán UKAS č. 0120) podľa ustanovení smernice 2014/31/EÚ, aby prijal vyhlásenie o zhode ES.

Váhy, ktoré boli schválené podľa smernice ES 2014/31/EÚ a kalibrované v súlade s triedou presnosti III alebo trieda IIII, sú v tomto katalógu jasne označené zeleným tlačidlom na bielom pozadí s triedou III alebo triedou IIII.



Záručná politika

Na všetky váhy v tomto katalógu, s výnimkou váhy na prenos pacienta M-999, sa štandardne vzťahuje štvorročná záruka od dátumu nákupu na všetky chyby spôsobené materiálom alebo konštrukciou.

Všetky pohyblivé časti – napríklad batérie, káble a adaptéry sú vylúčené.

Ak chcete získať úplné záručné podmienky, pošlite e-mail na adresu sales@marsdengroup.co.uk



Informácie o kalibrácii

Odporúča sa, aby všetky lekárske váhy boli skontrolované na kalibráciu minimálne raz ročne vhodne kvalifikovanou organizáciou.

Informácie o servisných a kalibračných zmluvách nájdete vyššie alebo nás kontaktujte.



Zásady vrátenia tovaru

- Váhy sa vrátia kvôli chybe Marsden – bez poplatku.
- Zadaná objednávka je nesprávna a je objednaná následná náhradná stupnica – poplatok 10 %.
- Zadaná objednávka je nesprávna, váha odmietnutá pri doručení a náhradný model nie je objednaný – poplatok 20 %.



Registračné čísla

Registračné číslo WEEE: WEE/DE007102

Registračné číslo NPWD: NPWD 231048

MARSDEN

Tel: +44 1709 364296
E-mail: sales@marsdengroup.co.uk

www.marsden-weighing.com

 MarsdenWeighing

 @MarsdenWeighing

 www.youtube.com/MarsdenWeighing